



## Instructions for Use / Gebrauchsanleitung

(Please read completely before use.)

The easy and comfortable method to rinse your nasal cavities with saline solution to effectively treat symptoms associated with allergies, colds, the flu, or sinus related infections.

(Vor dem Gebrauch bitte vollständig durchlesen.)

Die einfache und angenehme Methode, Ihre Nasenhöhlen mit einer Salzlösung durchzuspülen, um so wirksam Symptome, die mit Allergien, Erkältungen, der Grippe oder nebenhöhlenbedingten Infektionen in Zusammenhang stehen, zu behandeln.

## What is Nasaline®?

Nasaline® is a unique, patented, drug-free nasal rinsing system designed by a team of Swedish ENT specialists. It effectively washes away unwanted mucous, crusty secretions or allergens from the nasal cavities with the simple use of saline solution. After a prolonged stay in dry, dusty, or smoky environments, Nasaline® cleans and soothes the nasal passages, reducing nasal irritation and moistening the mucous membranes. Nasaline® can be used to cleanse and relieve nasal passages affected by:

- Nasal Allergies, Dryness and Hay Fever.
- Sinus Pressure and Nasal Stuffiness
- Nasal Symptoms from Flu, Cold and Sinusitis
- Post-Nasal Drip and Nasal Congestion
- Nasal Irritation from Occupational and House Dust, Fumes, Animal Dander, Grass, Pollen, Smoke, etc.
- Saline Nasal Irrigation, Moisturization and Daily Nasal Hygiene
- For Use After Sinus Surgery and for Sinus Symptoms Suffered by Cystic Fibrosis Patients



## Advantages

- Gentle, comfortable and smooth-flowing saline nasal irrigation
- Silicone tip designed to fit all children's noses to completely seal the nostril opening
- Channel inside the tip is formed in the shape of an hourglass, producing a gentle whirl stream when the saline solution enters the nose
- Syringe feature allows the user to control the flow for optimum comfort and effectiveness
- Excellent for cleansing prior to the use of nasal medications
- Easy to clean to prevent bacterial build-up
- Drug-free and preservative-free; non-sedating
- Can be used as a pH balanced and isotonic solution with one packet, or a hypertonic solution with two packets.
- Suitable for use after sinus surgery or during pregnancy; consult your doctor with concerns
- Portable for travel

## Who can use Nasaline®?

Anyone 2 years or older can use Nasaline®. However, children from ages 2-12 should not use Nasaline®, without parental supervision, unless advised otherwise by your child's doctor. We suggest Nasaline® Junior, a smaller unit, for children ages 2 to 12, also used with parental supervision. We recommend the **NeilMed® Baby NasaKleen®** Nasal Aspirator for newborns and toddlers.

## Dosage

Use two (2) full syringes twice in each nostril per rinsing session. Rinse once or twice daily or as recommended by your doctor

## Was ist Nasaline®?

Nasaline® ist ein einzigartiges, patentiertes, arzneimittelfreies Nasenspülsystem, das von einem Team bestehend aus schwedischen HNO-Spezialisten entwickelt wurde. Es wäscht unerwünschten Schleim, verkrustete Sekrete oder Allergiestoffe aus den Nasenhöhlen durch die einfache Anwendung der Salzlösung heraus. Nach einem längeren Aufenthalt in einer trockenen, staubigen oder rauchigen Umgebung reinigt Nasaline® die Nasengänge und reduziert dabei Reizungen der Nase und befeuchtet die Schleimhäute.

Nasaline® kann zur Reinigung und Befreiung der Nasengänge verwendet werden, die beeinträchtigt sind durch:

- Nasalen Allergien, Nasentrockenheit und Heuschnupfen.
- Nasennebenhöhlendruck und Verstopfung der Nase.
- Nasalen Symptomen aufgrund von Grippe, Erkältung und Nasennebenhöhlenentzündung.
- Sinubronchiales Syndrom und nasaler Kongestion.
- Reizung der Nase durch Staub bei der Arbeit oder im Haus, Qualm, Tierhaare, Gras, Pollen, Rauch, etc.
- Als Salzpülung für die Nase, Befeuchtung und tägliche Nasenhygiene.
- Zur Verwendung nach Operation an der Nasennebenhöhle und bei Nebenhöhlensymptomen, an denen Mukoviszidose-Patienten leiden.



## Vorteile

- Sanfte, angenehme und reibungslos fließende Nasendusche aus Salzlösung
- Silikonkopf wurde so gestaltet, dass es für alle Kindernasen passt, um die Nasenlochöffnung fest zu verschließen
- Kanal im Innern des Tops ist einer Sanduhr nachempfunden, wodurch eine sanfte Wirbelströmung entsteht, wenn die Salzlösung in die Nase eintritt
- Spritzeneigenschaft ermöglicht es dem Anwender, den Fluss zu kontrollieren und so ein möglichst angenehmes Gefühl und eine optimale Wirksamkeit zu erzielen
- Hervorragend geeignet für die Nasenreinigung vor der Einnahme von Medikamenten für die Nase
- Einfach zu reinigen, um die Bildung von Bakterien zu verhindern
- Frei von Arzneimitteln und frei von Konservierungsstoffen; nicht sedierend
- Kann als pH-neutrale und isotonische Lösung mit einer Packung oder als hypertonic Lösung mit zwei Packungen verwendet werden
- Geeignet für die Anwendung nach einem chirurgischen Eingriff an den Nasennebenhöhlen oder während der Schwangerschaft; kontaktieren Sie Ihren Arzt bei Bedenken
- Tragbares Gerät für die Reise

## Wer kann Nasaline® verwenden?

Jede Person, die 2 Jahre oder älter ist, kann Nasaline® verwenden. Allerdings sollten Kinder zwischen 2-12 Jahren Nasaline® nicht ohne elterliche Beaufsichtigung verwenden, es sei denn, es wurde von Ihrem Kinderarzt anders empfohlen. Wir schlagen Nasaline® Junior, eine kleinere Einheit für Kinder zwischen 2 bis 12 Jahren, ebenfalls unter elterlicher Aufsicht verwendet, vor.

Wir empfehlen den **NeilMed® Baby NasaKleen®** Nasal-Aspirator für Neugeborene und Kleinkinder.




## Dosierung

Nehmen Sie zwei (2) volle Spritzen zweimal je Nasenloch je Spülvorgang. Spülen Sie einmal bis zweimal pro Tag oder entsprechend der Empfehlung Ihres Arztes.

## Cleaning

Remove the tip, pull out the plunger from the syringe and flush all 3 parts with warm water. The Nasaline® applicator can also be cleaned with a mild dish washing detergent. Dry all 3 parts. Once dry, keep the Nasaline® unit stored with the plunger inserted into the cylinder.

## Three Easy Steps

1. Empty 1 packet (½ teaspoon) of Nasaline® salt into the mixing cup. 
2. Fill the mixing cup to the 8 oz/240 mL line with distilled, micro-filtered (through 0.2 microns), commercially bottled or previously boiled and cooled down water at lukewarm or body temperature. Stir to properly mix the saline solution. Extract the saline solution completely into the Nasaline® applicator. 
3. Stand (or sit) over a bathroom sink or use in the shower. Put the silicone tip against the nose so that it completely seals the nostril. Breathe normally through the mouth (or say aaaah...) and slowly push the saline solution up into the nostril. Refrain from swallowing; when the saline solution reaches the back of the nasal cavities, the palate closes automatically by reflex. The saline fills the nasal cavities and proceeds to pour out the other nostril. Perform this process twice in each nostril. Use a tissue to blow out any remaining saline in your nose. Some of the saline can remain in the nose and trickle out later. Tilting your head forward and turning side to side immediately after flushing can prevent this. 

## ⚠ WARNING

 DO NOT USE TAP WATER UNLESS STERILIZED BY BOILING

- For your safety, do not use tap or faucet water for dissolving the mixture unless it has been previously boiled for five minutes or more (and then cooled down) as boiling sterilizes the water. Other choices are distilled, micro-filtered (through 0.2 micron), reverse osmosis filtered, or commercially bottled water.
- Each device must be used only by one user; do not share this product with others.
- Follow the cleaning protocol after each use of the product. Cleaning instructions can be found in the enclosed brochure.
- Replace this device within three months of your first use.
- Rinse your nose gently.
- Before using this product, you must read detailed warnings in the enclosed brochure or on our website at: [www.neilmed.com/directions](http://www.neilmed.com/directions). Our website will always have up-to-date warnings.
- Store in a cool and dry place.

## ATTENTION



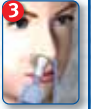
Medical research recommends following the cleaning protocol fully described in the enclosed brochure for Nasaline® after every use and replacing the device after three months.

**Choking Hazard: Small Parts; Keep out of reach of children!**

## Reinigung

Entfernen Sie das Top, ziehen Sie den Kolben aus der Spritze heraus und spülen Sie alle 3 Teile mit warmem Wasser ab. Der Nasaline® Applikator kann auch mit einem milden Geschirrspülmittel gereinigt werden. Trocknen Sie alle 3 Teile. Nachdem sie getrocknet sind, bewahren Sie die Nasaline®-Einheit mit dem Kolben in Innern in den Zylinder eingeführt auf.

## Drei einfache Schritte

1. 1 Packung (½ Teelöffel) des Nasaline®-Salzes in einen Messbecher entleeren. 
2. Den Messbecher bis zur 8 oz/240 ml-Marke mit destilliertem, mikrofiltriertem (durch 0,2 Mikrometer-Filter), kommerziell abgefülltem oder vorab gekochtem und abgekühltem Wasser bei lauwarmen oder Körpertemperatur auffüllen. Umrühren, damit die Salzlösung untergemischt wird. Die Salzlösung vollständig in den Nasaline®-Applikator extrahieren. 
3. Über ein Badezimmerwaschbecken stellen (oder an dieses setzen) oder die Dusche nutzen. Das Silikonkop an die Nase herantühren, so dass das Nasenloch vollständig verschlossen ist. Normal durch den Mund atmen (oder Aaaaah sagen...) und die Salzlösung langsam hoch in das Nasenloch drücken. Nicht schlucken; wenn die Salzlösung die Rückseite der Nasenhöhle erreicht, schließt sich der Gaumen reflexartig automatisch. Die Salzlösung füllt die Nasenhöhle und läuft weiter, um aus dem anderen Nasenloch wieder herauszulaufen. Führen Sie diesen Vorgang zweimal je Nasenloch durch.   
Verwenden Sie ein Taschentuch, um Reste der Salzlösung in Ihrer Nase heraus zu putzen. Es kann vorkommen, dass Rückstände der Salzlösung in der Nase verbleiben und später heraustropfen. Das Neigen des Kopfes nach vorne und die Bewegung von einer Seite zur anderen direkt nach dem Spülvorgang kann das verhindern.

## ⚠ WARNING

 VERWENDEN SIE KEIN LEITUNGSWASSER, ES SEI DENN, ES IST DURCH ABKOCHEN STERIL GEMACHT.

- Zur eigenen Sicherheit sollten Sie kein Leitungswasser zur Auflösung der Mischung nutzen, es sei denn, es ist vorher für fünf Minuten oder länger gekocht (und dann abgekühlt) worden, da das Kochen das Wasser keimfrei macht. Andere Möglichkeiten sind destilliertes, mikrofiltriertes (durch 0,2 Mikrometer-Filter), mit Umkehrosmose-Filter filtriertes oder kommerziell abgefülltes Wasser.
- Jedes Gerät darf nur von einem Anwender genutzt werden; teilen Sie dieses Produkt nicht mit anderen Personen.
- Befolgen Sie das Reinigungsprotokoll nach jeder Nutzung des Produkts. Anweisungen zur Reinigung sind der beigefügten Broschüre zu entnehmen.
- Ersetzen Sie dieses Gerät innerhalb von drei Monaten nach Ihrer ersten Nutzung.
- Die Spülung der Nase soll sanft erfolgen.
- Vor der Verwendung dieses Produktes müssen Sie die detaillierten Warnungen in der beigefügten Broschüre oder auf unserer Webseite auf: [www.neilmed.com/directions](http://www.neilmed.com/directions) lesen. Unsere Webseite verfügt stets über aktuelle Warnungen.
- Kühl und trocken lagern.

## ACHTUNG

Die medizinische Forschung empfiehlt die Einhaltung des Reinigungsprotokolls, das in der beigefügten Broschüre für Nasaline® umfassend beschrieben ist, nach jeder Anwendung, sowie das Ersetzen des Gerätes nach drei Monaten.

**Erstickungsgefahr: Kleinteile; Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!**



## Mode d'emploi / Istruzioni per l'uso

(à lire entièrement avant utilisation).

La méthode facile et confortable pour rincer vos fosses nasales avec une solution saline pour traiter efficacement les symptômes associés aux allergies, au rhume, à la grippe ou aux infections des sinus.

(Leggere attentamente prima dell'uso).

Il metodo facile e comodo per risciacquare le cavità nasali con una soluzione salina per trattare efficacemente i sintomi associati ad allergie, raffreddore, influenza o infezioni dovute a sinusite.

### Qu'est-ce que Nasaline® ?

Nasaline® est un système de rinçage nasal unique, breveté et sans médicament, conçu par une équipe d'ORL suédois. Il élimine efficacement les mucosités indésirables et les sécrétions croûteuses ou des allergènes des fosses nasales par la simple utilisation d'une solution saline. Après une exposition prolongée aux environnements secs, poussiéreux ou enfumés, Nasaline® nettoie et apaise les voies nasales, réduisant l'irritation nasale et humidifiant les membranes muqueuses.

Nasaline® peut être utilisé pour nettoyer et soulager les voies nasales affectées par :

- Allergies nasales, sécheresse et rhume des foins.
- Pression des sinus et congestion nasale.
- Symptômes nasaux dus à la grippe, au rhume et à la sinusite.
- Écoulement post-nasal et congestion nasale.
- Irritation nasale due aux poussières professionnelles et domestiques, aux fumées, aux squames animales, à l'herbe, au pollen, à la fumée, etc.
- Irrigation nasale au sérum physiologique, hydratation et hygiène nasale quotidienne.
- A utiliser après une opération des sinus et pour les symptômes des sinus chez les patients atteints de mucoviscidose.



### Avantages

- Irrigation nasale saline douce, confortable et fluide.
- Embout en silicone conçu pour s'adapter à tous les nez d'enfants afin d'obturer complètement l'ouverture de la narine.
- Le canal à l'intérieur de l'embout a la forme d'un sablier, produisant un léger tourbillon lorsque la solution saline pénètre dans le nez.
- La fonction seringue permet à l'utilisateur de contrôler le débit pour un confort et une efficacité optimale.
- Excellent pour le nettoyage avant l'utilisation de médicaments par voie nasale.
- Facile à nettoyer pour éviter l'accumulation de bactéries.
- Sans médicament ni conservateur ; non sédatif.
- Peut être utilisé comme solution isotonique à pH équilibré avec un sachet, ou comme solution hypertonique avec deux sachets.
- Convient à une utilisation après une chirurgie des sinus ou pendant la grossesse ; consultez votre médecin si vous avez des doutes.
- Portable pour les voyages.

### Qui peut utiliser Nasaline® ?

Toute personne âgée de 2 ans ou plus peut utiliser Nasaline®. Cependant, les enfants âgés de 2 à 12 ans ne doivent pas utiliser Nasaline® sans la surveillance de leurs parents, sauf avis contraire du médecin de l'enfant. Nous proposons Nasaline® Junior, une unité plus petite, pour les enfants âgés de 2 à 12 ans, également utilisée sous la surveillance des parents.

Nous recommandons l'aspirateur nasal **NeilMed® Baby NasaKleen®** pour les nouveau-nés et les enfants en bas âge.

### Dosage

Utiliser deux (2) seringues pleines dans chaque narine par séance de rinçage. Rincer une ou deux fois par jour

### Che cos'è Nasaline®?

Nasaline® è un sistema di risciacquo nasale unico, brevettato e privo di farmaci, ideato da un team di otorinolaringoiatri svedesi. Lava efficacemente via il muco indesiderato e le secrezioni incrostate o allergeni dalle cavità nasali con il semplice utilizzo di una soluzione salina. Dopo una prolungata esposizione ad ambienti secchi, polverosi o fumosi, Nasaline® pulisce e lenisce le vie nasali, riducendo l'irritazione nasale e inumidendo le membrane mucose.

Nasaline® può essere utilizzato per pulire e alleviare i passaggi nasali affetti da:

- Allergie nasali, secchezza e febbre da fieno.
- Pressione sinusale e naso chiuso.
- Sintomi nasali da influenza, raffreddore e sinusite.
- Gocciolamento post-nasale e congestione nasale.
- Irritazione nasale dovuta a polvere professionale e domestica, fumi, forfora animale, erba, polline, fumo, ecc.
- Irrigazione nasale salina, idratazione e igiene nasale quotidiana.
- Da utilizzare dopo un intervento di chirurgia sinusale e per i sintomi sinusali dei pazienti affetti da fibrosi cistica.



### Vantaggi

- Irrigazione nasale salina delicata, confortevole e scorrevole.
- La punta in silicone è stata progettata per adattarsi a tutti i nasi dei bambini e sigillare completamente l'apertura della narice.
- Il canale all'interno della punta è a forma di clessidra e produce un delicato flusso vorticoso quando la soluzione salina entra nel naso.
- La funzione siringa consente all'utente di controllare il flusso per un comfort e un'efficacia ottimali.
- Eccellente per la pulizia prima dell'uso di farmaci nasali.
- Facile da pulire per evitare la formazione di batteri.
- Senza farmaci e senza conservanti; non sedativo.
- Può essere utilizzato come soluzione isotonica e a pH bilanciato con una bustina, o come soluzione ipertonica con due bustine.
- Adatto all'uso dopo un intervento chirurgico ai seni paranasali o durante la gravidanza; consultare il medico in caso di dubbi.
- Formato viaggio.

### Chi può usare Nasaline®?

Chiunque, a partire dai 2 anni di età, può usare Nasaline®. Tuttavia, i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni non dovrebbero usare Nasaline® senza la supervisione dei genitori, a meno che non sia stato consigliato diversamente dal medico del bambino. Sugeriamo Nasaline® Junior, un'unità più piccola, per i bambini dai 2 ai 12 anni, anch'essa utilizzata con la supervisione dei genitori. Per i neonati e i bambini piccoli consigliamo l'aspiratore nasale **NeilMed® Baby NasaKleen®**.

### Dosaggio




Utilizzare due (2) siringhe piene due volte in ciascuna narice per ogni sessione di risciacquo. Effettuare gli sciacqui una o due volte al giorno o secondo le raccomandazioni del medico.

ou selon les recommandations de votre médecin.

### Nettoyage

Retirer l'embout, retirer le piston de la seringue et rincer les trois parties à l'eau tiède. L'applicateur Nasaline® peut également être nettoyé avec un détergent doux pour la vaisselle. Sécher les trois parties. Une fois sec, conserver le Nasaline® avec le piston inséré dans le cylindre.

### Trois étapes faciles

1. Vider 1 sachet (½ cuillère à café) de sel Nasaline® dans le gobelet mélanger. 
2. Remplir le gobelet de mélange jusqu'à la ligne de 8 oz/240 ml avec de l'eau distillée, micro filtrée (jusqu'à 0,2 micron), embouteillée dans le commerce ou préalablement bouillie et refroidie à une température tiède ou à la température du corps. Remuer pour mélanger correctement la solution saline. Extraire complètement la solution saline dans l'applicateur Nasaline®. 
3. Se tenir (ou s'asseoir) au-dessus du lavabo de la salle de bains ou utiliser dans la douche. Placez l'embout en silicone contre le nez de manière qu'il obture complètement la narine. Respirez normalement par la bouche (ou dites aaaah...) et poussez lentement la solution saline dans la narine. Ne pas avaler, car lorsque la solution saline atteint le fond des fosses nasales, le palais se referme automatiquement par réflexe. Le sérum physiologique remplit les fosses nasales et se déverse par l'autre narine. Effectuez ce processus deux fois dans chaque narine. Utilisez un mouchoir en papier pour évacuer les restes de sérum physiologique dans votre nez. Une partie du sérum physiologique peut rester dans le nez et s'écouler plus tard. Pour éviter cela, penchez la tête en avant et tournez-la d'un côté à l'autre immédiatement après le rinçage. 

### ⚠ AVERTISSEMENT

**NE PAS UTILISER L'EAU DU ROBINET À MOINS QU'ELLE NE SOIT STÉRILISÉE PAR ÉBULLITION**

- Pour votre sécurité, n'utilisez pas l'eau du robinet pour dissoudre le mélange à moins qu'elle n'ait été préalablement bouillie pendant cinq minutes ou plus (puis refroidie), car l'ébullition stérilise l'eau. Les autres options sont l'eau distillée, micro filtrée (jusqu'à 0,2 micron), filtrée par osmose inverse ou embouteillée dans le commerce.
- Chaque appareil ne doit être utilisé que par un seul utilisateur ; ne partagez pas ce produit avec d'autres personnes.
- Suivez le protocole de nettoyage après chaque utilisation du produit. Les instructions de nettoyage figurent dans la brochure jointe.
- Remplacez cet appareil dans les trois mois suivant sa première utilisation.
- Rincez votre nez délicatement.
- Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire les avertissements détaillés dans la brochure ci-jointe ou sur notre site Internet : [www.neilmed.com/directions](http://www.neilmed.com/directions).
- Notre site web contiendra toujours des avertissements actualisés.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

### ATTENTION




La recherche médicale recommande de suivre le protocole de nettoyage décrit dans la brochure jointe pour Nasaline® après chaque utilisation et de remplacer l'appareil après trois mois.

**Risque d'étouffement : petites pièces ; garder hors de portée des enfants !**

### Pulizia

Rimuovere la punta, estrarre lo stantuffo dalla siringa e sciacquare tutte e tre le parti con acqua calda. L'applicatore Nasaline® può essere pulito anche con un detergente delicato per piatti. Asciugare tutte e 3 le parti. Una volta asciutta, conservare l'unità Nasaline® con lo stantuffo inserito nel cilindro.

### Tre semplici passi

1. Svuotare 1 bustina (½ cucchiaini) di sale Nasaline® nel bicchiere di miscelazione. 
2. Riempire il bicchiere di miscelazione fino alla linea delle 8 oz/240 ml con acqua distillata, microfiltrata (attraverso 0,2 micron), imbottigliata in commercio o precedentemente bollita e raffreddata a temperatura tiepida o alla temperatura corporea. Mescolare per miscelare correttamente la soluzione salina. Estrarre completamente la soluzione salina nell'applicatore Nasaline®. 
3. In piedi (o seduti) sopra il lavandino del bagno o nella doccia. Appoggiare la punta di silicone al naso in modo da sigillare completamente la narice. Respirare normalmente attraverso la bocca (o dire aaaah...) e spingere lentamente la soluzione salina nella narice. Non deglutire; quando la soluzione salina raggiunge la parte posteriore delle cavità nasali, il palato si chiude automaticamente per riflesso. La soluzione fisiologica riempie le cavità nasali e procede all'uscita dall'altra narice. Eseguire questo procedimento due volte in ciascuna narice. Usare un fazzoletto di carta per espellere la soluzione salina rimasta nel naso. Una parte della soluzione salina può rimanere nel naso e fuoriuscire successivamente. Se si inclina la testa in avanti e ci si gira da un lato all'altro subito dopo il risciacquo, questo può essere evitato. 

### ⚠ AVVERTENZE

**NON UTILIZZARE L'ACQUA DEL RUBINETTO A MENO CHE NON SIA STERILIZZATA TRAMITE EBOLLIZIONE**

- Per la vostra sicurezza, non utilizzate l'acqua del rubinetto per sciogliere la miscela, a meno che non sia stata precedentemente fatta bollire per cinque minuti o più (e poi raffreddata), poiché l'ebollizione sterilizza l'acqua. Altre scelte sono l'acqua distillata, microfiltrata (fino a 0,2 micron), filtrata a osmosi inversa o imbottigliata in commercio.
- Ogni dispositivo deve essere utilizzato da un solo utente; non condividere il prodotto con altri.
- Seguire il protocollo di pulizia dopo ogni utilizzo del prodotto. Le istruzioni per la pulizia sono riportate nell'opuscolo allegato.
- Sostituire il dispositivo entro tre mesi dal primo utilizzo.
- Sciacquare delicatamente il naso.
- Prima di utilizzare questo prodotto, è necessario leggere le avvertenze dettagliate contenute nell'opuscolo allegato o sul nostro sito web all'indirizzo: [www.neilmed.com/directions](http://www.neilmed.com/directions).
- Il nostro sito web conterrà sempre avvertenze aggiornate.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.

### ATTENZIONE

La ricerca medica raccomanda di seguire il protocollo di pulizia completamente descritto nell'opuscolo allegato per Nasaline® dopo ogni utilizzo e di sostituire il dispositivo dopo tre mesi.

**Piccolo di soffocamento: Piccole parti; tenere fuori dalla portata dei bambini!**